


**SONDA DE ASPIRAÇÃO MODELO 238**

07.075.xx.238

**GAMA:** Aspiração

**APLICAÇÃO:** Para aspiração de muco, secreções e sangue da cavidade oral, garganta e traqueia.

**SEM FTALATOS**

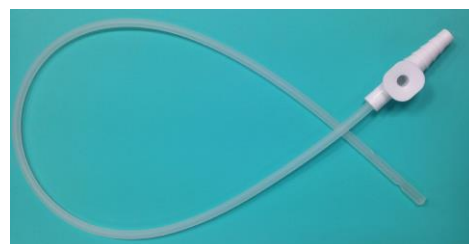


**DESCRIÇÃO**

Sonda de aspiração modelo 238, reta, com um orifício na extremidade distal e dois orifícios laterais alternados em formato oval, e 50 cm de comprimento, com controlador de vácuo incorporado. Disponível nas seguintes dimensões: CH06, CH08, CH10, CH12, CH14, CH16 E CH18.

A sonda deverá ser conectada a um sistema de aspiração ativo. A intensidade de aspiração pode ser controlada pelo controlador de vácuo presente na sonda. A aspiração pode ser interrompida através do controlador de vácuo.

**CARACTERÍSTICAS**

Cor	Dimensão	Referência
●	CH06	07.075.06.238
●	CH08	07.075.08.238
●	CH10	07.075.10.238
○	CH12	07.075.12.238
●	CH14	07.075.14.238
●	CH16	07.075.16.238
●	CH18	07.075.18.238

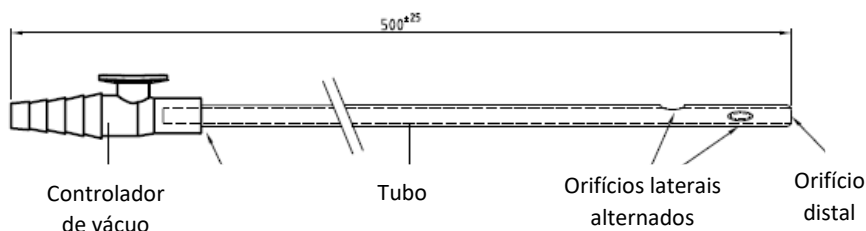

**ADVERTÊNCIAS**

Não utilizar o dispositivo caso a embalagem exterior, que mantém a esterilidade do mesmo, se apresente danificada. Não reutilizar. Não reesterilizar.

**COMPOSIÇÃO**

Tubo: PVC\*

Funil: PVC\*

Controlador de Vácuo: PVC\*

**ESTERILIZAÇÃO**

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

**Método de Esterilização – EO**

**VALIDADE**

Data de validade: 5 anos

**ACONDICIONAMENTO**

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

**EMBALAGEM**

Embalagem individual: Papel, Bolsa de Plástico – PE

Nº de unidades por caixa: 100 unidades

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe IIa, com marcação CE

Organismo Notificado: TUV Sud Product Service GmbH, nº 0123

ID atribuído pelo INFARMED: 370074

Código NPDM: R05010102 - Sonda para aspiração do aparelho respiratório com furo de controlo

Código CDM:

Referência	CDM
07.075.06.238	15856992
07.075.08.238	15856968
07.075.10.238	15856976
07.075.12.238	15857026
07.075.14.238	15857000
07.075.16.238	15857018
07.075.18.238	15856984

**ABREVIATURAS**

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone