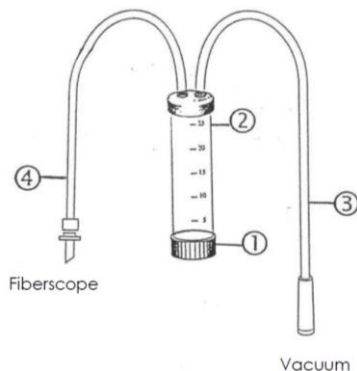


---

**ASPIRADOR DE MUCOSIDADE PARA FIBROSCÓPIO COM TUBO  
COLECTOR, VOLUME: 25ml  
AM140****GAMA:** Aspiração**APLICAÇÃO:** Aspirador de mucosidades.**SEM LÁTEX****COM FTALATOS****DESCRIÇÃO****Legenda**

1. Tampa estanque em PVC com DEHP
2. Tubo colector em PS, volume: 25ml e tampa em PVC
3. Tubo de conexão de vácuo com funil em PVC, comprimento 110cm, Øint: 3.5mm, Øext: 5.5mm
4. Tubo conector para fibroscópio: tubo em PVC, comprimento 100cm, Øint: 3.5mm, Øext: 5.5mm; conector luer macho em PVC; tubo de conexão em SI, comprimento 4cm, Øint: 5mm, Øext: 8mm.

**PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

Estéril excepto em caso de embalagem danificada ou aberta; Não reesterilizar; Descartar após utilização.

**COMPATIBILIDADE DE MATERIAIS**

Não aplicável.

**PRODUÇÃO**

Injecção e extrusão de componentes  
Montagem manual e automática

**CONTROLO DE QUALIDADE**

Controlo visual: ausência de riscos, manchas, quebras, deformações.  
Controlo dimensional  
Controlo funcional: (pressão, estanquicidade)

**ESTERILIZAÇÃO****Modo de esterilização: óxido de etileno**

Validação e controlo de rotina de acordo com as normas internacionais ISO 11135

A CAIR LGL não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

**VALIDADE**

Data de validade: 59 meses

**ACONDICIONAMENTO**

Armazenar em local limpo e seco, protegido da luz solar, a temperatura entre +5 e +40 °C

**ELIMINAÇÃO**

Descartar em contentor adequado de lixo para incineração.

**EMBALAGEM**

Embalagem primária (1 unidade): 1 face de papel e 1 face transparente

Embalagem secundária (unidade mínima de venda - 20 unidades): caixa de cartão

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe Is, com marcação CE

Organismo Notificado: G-MED, nº 0459

ID atribuído pelo INFARMED: 34966

Código NPDM: *Dispositivos para administração, extração e recolha – outros - A99*

Código CDM: 14264234

**ABREVIATURAS**

*ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone*